
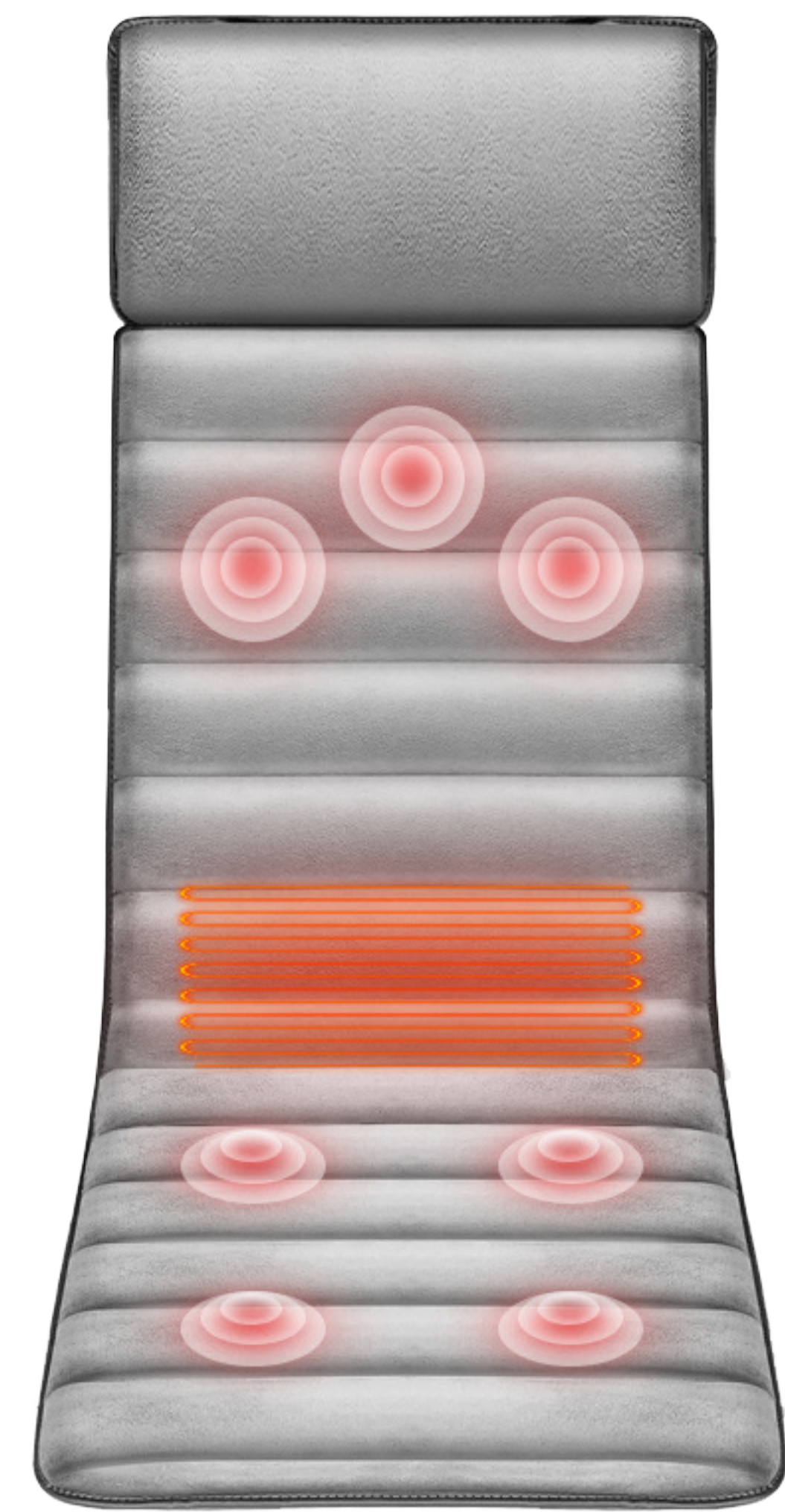


Массажный коврик

Инструкция

Массажный коврик

Инструкция

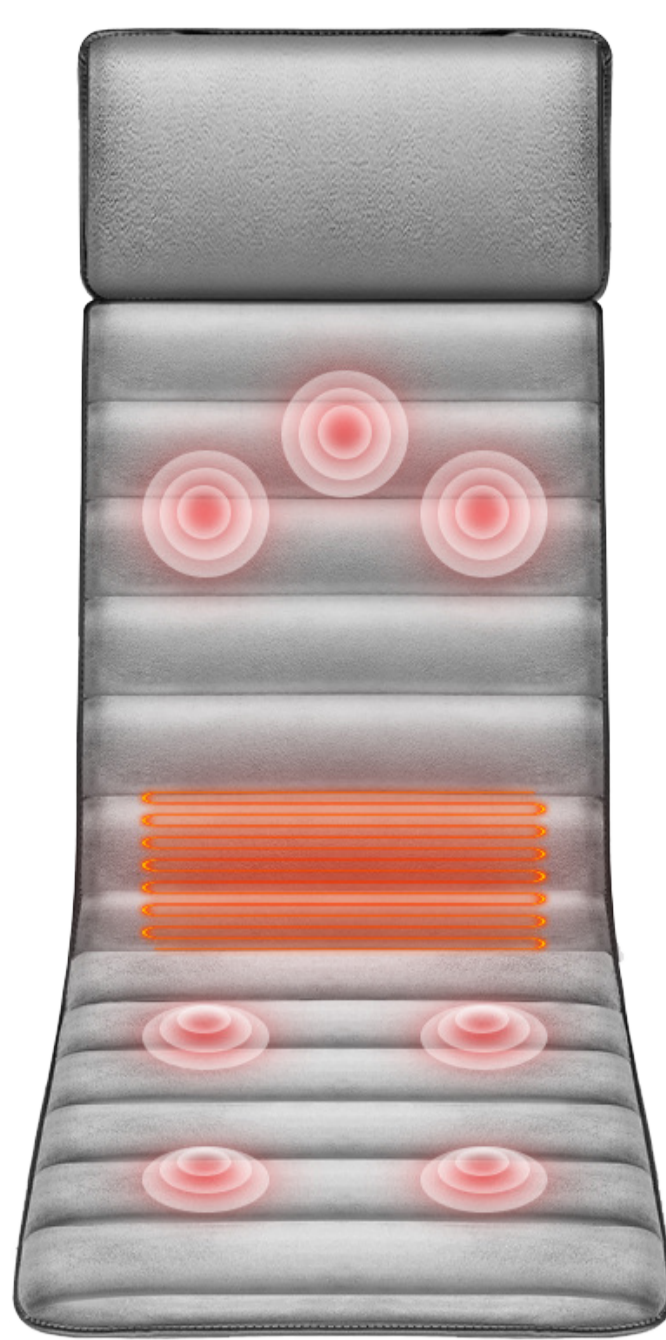

Содержание

Схема продукта.....	2
Схема панели управления.....	2
Инструкция.....	3
Технические параметры.....	4
Ремонт и обслуживание.....	4
Особые указания.....	5
Простые неисправности и их решения....	6

-1-

Простые неисправности и их решения

Неисправность	Решение
Повреждение провода питания	Во избежание опасности провод должен быть заменен производителем или другим специализированным персоналом в специально отведенных местах ремонта.
Звук трения между массажером и тканью	Эти звуки являются обычными звуками, издаваемыми прибором во время работы.
Прибор внезапно остановился во время работы	1. Массажный прибор оснащен защитой от перегрева. Эта функция может защитить ваш прибор от перегрева. Пожалуйста, дайте прибору отдохнуть около 20 минут. 2. Внезапный сбой электрического питания.
Прибор не работает	1. Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в розетку. 2. Проверьте включен ли выключатель питания.
Медленный и слабый массаж	Напряжение слишком низкое, используйте его со стабилизатором напряжения. Тело слишком тяжелое.
Программа вышла из под контроля, кнопки не работают	Если прибор поврежден сильным напряжением или радиоволнами, выключите питание и снова включите.

*Неправильная утилизация отходов может вызвать загрязнение окружающей среды.

-6-

Особые указания

- Не используйте влажные руки для управления контроллером;
- Не тяните сильно провода ручного контроллера;
- В следующих случаях, пожалуйста, немедленно прекратите использование и выньте провод:
 - Провод питания сломан или поврежден
 - Случайное попадание воды на контроллер
 - Соответствующие аксессуары повреждены или внутренние детали открыты
 - Во время массажа ощущаются отклонения (такие как: сильная боль, дым, запах и т.д.)
 - При внезапном отключении питания, при возникновении тока и при движении на высокой скорости
- Люди, которым не следует использовать этот продукт:
 - Если у вас есть проблемы со здоровьем, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта
 - Для пациентов с заболеваниями сердца, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед его использованием
 - Не разрешайте детям использовать этот продукт в одиночку
- Не используйте на одной и той же области более 15 минут.
- Длительное использование может легко привести к перегреву изделия и короткому сроку службы, если это произойдет, пожалуйста, прекратите его использование до тех пор, пока изделие не остынет.
- Не используйте этот продукт непосредственно на опухших, воспаленных участках кожи.
- Данный продукт является непрофессиональным устройством и не может быть использован в качестве замены медикаментозного лечения.
- Не используйте перед сном, потому что этот продукт оказывает стимулирующее действие и может вызвать бессонницу.
- Не используйте этот продукт во время сна.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми с поврежденными конечностями, психическими расстройствами или отсутствием соответствующих знаний и опыта.
- Используйте, если только кто-то несет ответственность за безопасность использования продукта.
- Поверхность прибора нагревается и тем, кто чувствителен к нагреву, следует обращать внимание при его использовании.

-5-

Схема панели управления



Контроллер

-2-

Инструкция

Подключите провод к порту питания устройства, вставьте вилку в розетку, если индикатор ручного контроллера горит, значит устройство включено.

- Переключатель:** Нажмите и устройство будет работать в режиме автоматического массажа (скорость подушки – 3 из 3, интенсивность вибрационного массажа – 3 из 9, функция нагрева включена), нажмите еще раз, чтобы отрегулировать время. 10/20/30 минут и, наконец, нажмите еще раз, чтобы выключить.
- Кнопка нагрева:** Во включенном состоянии нажмите один раз, чтобы включить легкий нагрев, нажмите еще раз, чтобы перейти на средний и сильный нагрев, нажмите еще раз, чтобы выключить нагрев.
- Кнопка вибрации:** Кнопка переключения вибрации, действует только при включенном питании; нажмите эту кнопку, чтобы включить вибрационный массаж, интенсивность по умолчанию - 3. Есть 9 режимов на выбор, автоматический режим (автоматическое переключение на следующий режим каждые 30 секунд), ручной: режим 1, режим 2, режим 3, режим 4, режим 5, режим 6, режим 7, режим 8, выключение.
- Кнопка скорости вибрации:** Эта клавиша является клавишей интенсивности вибрации; нажмите эту клавишу, чтобы отрегулировать интенсивность вибромассажа, всего можно выбрать 9 уровней интенсивности. Последовательность: интенсивность 1 - интенсивность - циклы интенсивности.
- Кнопка скорости надува подушки:** Эта кнопка представляет собой кнопку переключения режима подушки. Нажмите эту кнопку, чтобы включить массаж подушки, скорость по умолчанию - 4, всего доступно 3 режима: последовательность режим 1 - режим 3.
- Кнопка силы надува подушки:** Эта кнопка является кнопкой силы надува подушки; нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать силу массажа подушки, всего можно выбрать 6 уровней силы, порядок: сила 1 - сила 6 - циклы интенсивности.

Регулировка области шеи:

- Кнопка переключения**
Нажмите первый раз, чтобы активировать функцию массажа, всё устройство перейдет в автоматический режим, нажмите второй раз, чтобы выключить. Функция автоматического режима: включен нагрев, включена функция релаксации и массажа.
- Кнопка прямого и обратного хода**
После включения нажмите эту кнопку, чтобы выйти из автоматического режима и включить разминающий массаж в обратном направлении, нажмите еще раз, чтобы переключить направление.

-3-

- Кнопка скорости**
Нажимайте эту кнопку 1 раз для переключения передач скорости. Есть три передачи на выбор.
- Кнопка нагрева**
Нажмите эту кнопку, чтобы выключить нагрев, нажмите эту кнопку еще раз, чтобы включить нагрев.
- Кнопка энергосбережения**
Нажмите кнопку энергосбережения, чтобы включить режим энергосбережения.
- Кнопка интеллектуального массажа**
Нажмите интеллектуальную кнопку, чтобы включить интеллектуальный режим, нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выключить.

Технические параметры

Название	Массажный коврик
Напряжение	12V
Мощность	24W
Стандарт	GB4706.10-2008

Ремонт и обслуживание

- Для ежедневной чистки используйте нейтральное моющее средство и мягкую ткань. Не используйте едкие моющие средства.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен профессионалом из ремонтной мастерской, указанной производителем, во избежание опасности.
- Если этот продукт не используется (или во время чистки), отключите питание, чтобы избежать опасности. Не используйте острые предметы, чтобы не разрезать поверхность устройства.
- Не помещайте изделие во влажную среду.
- Не давите на изделие слишком сильно.

Особые указания

Меры предосторожности по технике безопасности:

- Перед использованием проверьте, соответствует ли источник питания указанным параметрам;
- При отсоединении провода питания держитесь за вилку провода питания, а не за провод питания;
- Не поднимайте провод питания так, чтобы включить режим энергосбережения, а не за провод питания;
- Не позволяйте тяжелым предметам давить провод питания или ручной контроллер;
- Не бросайте устройство и не роняйте его на землю или в воду;
- Не используйте устройство во влажной среде;

-4-